


Acti V.A.C.[®]

Kurzanleitung

ActiV.A.C.® Therapy System



Netzstecker – und Ladegerät

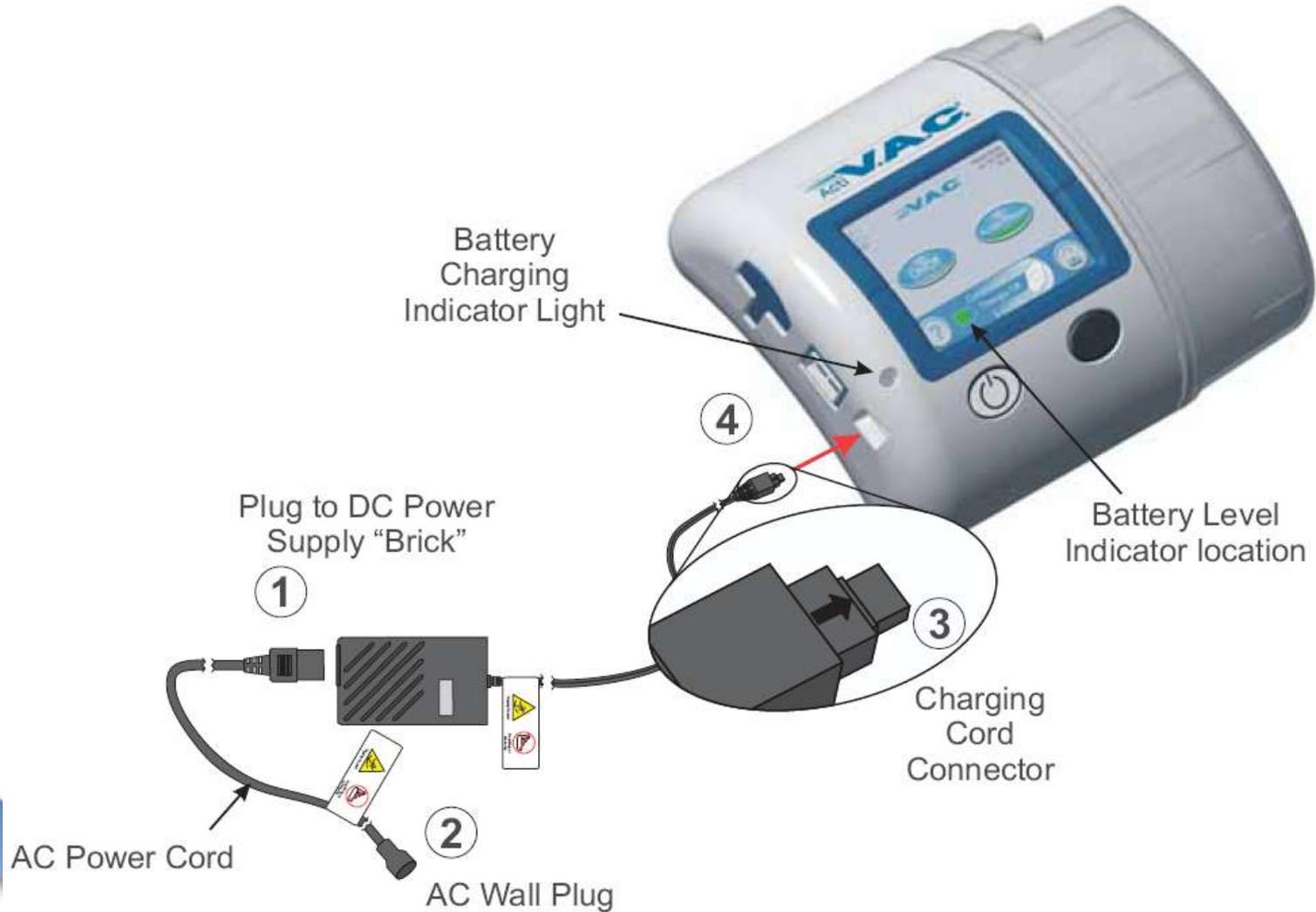

Patienten Modus



Patienten Hauptmenü

Tonsignal-Unterbrechungs-Anzeige mit Countdown-Uhr (bis zum Wiedereinsetzen des Tonsignals)

Ein-/Ausschalttaste für die Therapie

Hilfetaste

Batterieladezustandsanzeige



Modusanzeige
Aktuelles Datum
Aktuelle Uhrzeit

Therapiestatusbalken und Anzeigefeld.


Bildschirmschutz

Dieses „Stecker“-Symbol wird angezeigt, wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist.

Dieses Symbol dreht sich, wenn das ActiV.A.C.®-Therapiegerät Unterdruck erzeugt.

Arzt Modus

Hauptmenü des Arzt-Modus

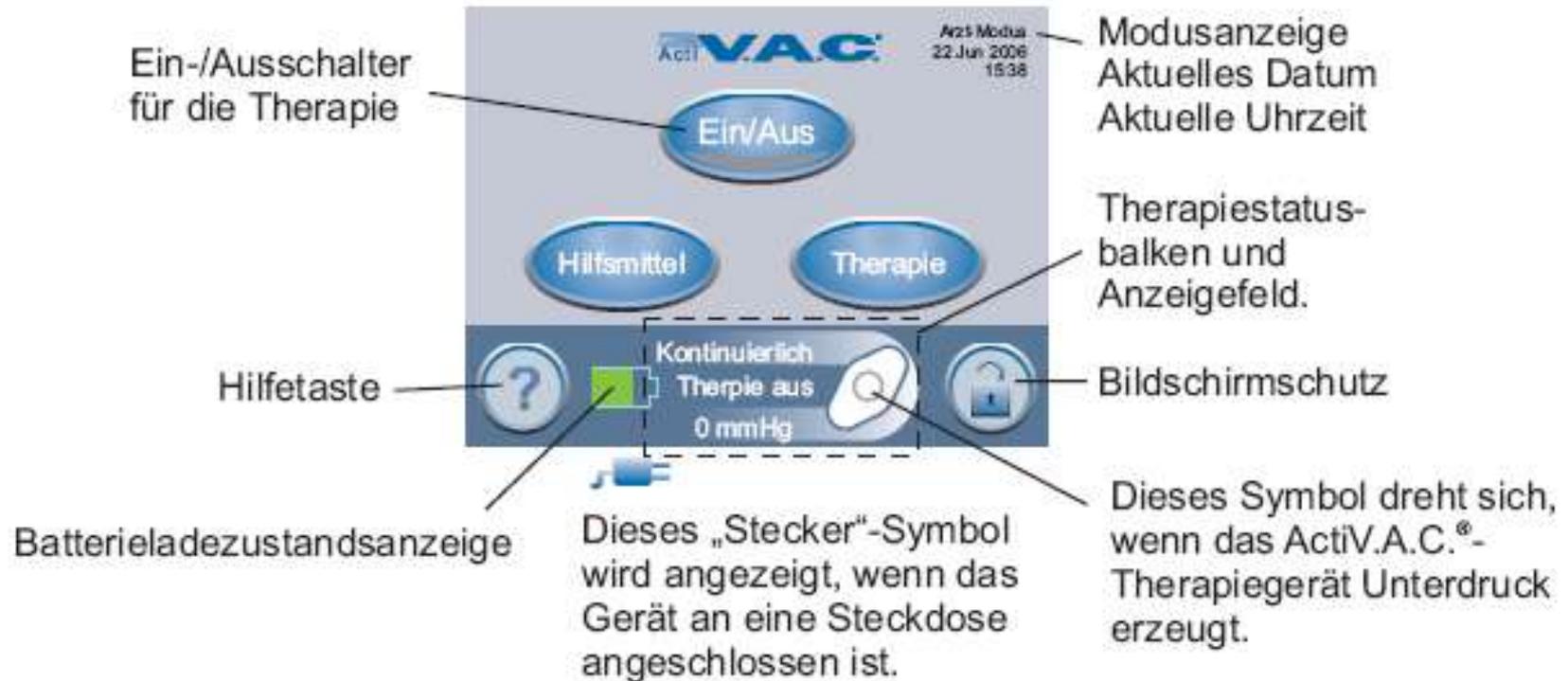

Wechsel zwischen den einzelnen Modi



Über die Hilfetaste (?)

Auf OK drücken um zum Patientenmodus zu wechseln, oder 5 Sekunden O.K. drücken um zum Arzt Modus (Anwendermodus) zu wechseln

Wechsel zwischen den einzelnen Modi



Auf OK drücken um zum Patientenmodus zu wechseln, oder 5 Sekunden O.K. drücken um zum Arzt Modus zu wechseln

Kanisterwechsel



- 
- Vereinfachter, leichter Kanisterwechsel
 - 300 ml Kanister passt auch auf die InfoV.A.C.®

Tragetasche



- Sehr diskret
- Vollständiger Zugang zu allen Therapieeinstellungen
- Extra Fach, um den Schlauch zu versorgen
- Verschiedenste Trageoptionen

Tragemöglichkeiten

5 unterschiedliche
Möglichkeiten



